

# MKS® Osteo

## Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstooption

HMV-Nr. 23.15.04.4001

Größen  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Stabile, osteoporotische und traumatische Wirbelkörperfraktur
- Schmerzen durch Fehlhaltung, z.B. Rundrücken
- Spondylodiscitis
- Tumor
- Nach Bandscheiben-OP
- Muskuläre Insuffizienz
- Spondylitis
- Wirbelvorderkantenfraktur
- Sinterfraktur
- Osteoporose
- Chronische Lumbalgie durch Hyperlordose
- Facettensyndrom
- Degenerative Veränderung der LWS und BWS
- Haltunginsuffizienz
- Hohlrundrücken

### Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Anpassbare Rückenplatte mit Aluminiumprofil
- Individueller Gurtverlauf
- Reklinationsgurte



### Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Osteo basiert auf dem Reklinationsprinzip.

Die beiden an der Rückenplatte befestigten Schultergurte richten die Wirbelsäule auf und entlasten dadurch die Brustwirbelsäule. Das breite Leibteil bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.



BWK 3 bis LWK 5


### Größen und Artikelnummern

| Größe                                |    | 1       | 2       | 3       | 4        | 5         | 6         |
|--------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| <b>Leibumfang [cm]</b>               |    | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 135 |
| <b>vordere Höhe [cm]</b>             | 18 | 782C-1  | 782C-2  | 782C-3  | 782C-4   | 782C-5    | 782C-6    |
| <b>Rückenhöhe Reklination S [cm]</b> | 46 |         |         |         |          |           |           |
| <b>vordere Höhe [cm]</b>             | 18 | 782A-1  | 782A-2  | 782A-3  | 782A-4   | 782A-5    | 782A-6    |
| <b>Rückenhöhe Reklination M [cm]</b> | 50 |         |         |         |          |           |           |
| <b>vordere Höhe [cm]</b>             | 18 | 782B-1  | 782B-2  | 782B-3  | 782B-4   | 782B-5    | 782B-6    |
| <b>Rückenhöhe Reklination L [cm]</b> | 56 |         |         |         |          |           |           |

Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich

## Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

| Teilbezeichnung  | Art.-Nr.  | Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 782... |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|-----------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |           | C1   | A1 | B1 | C2 | A2 | B2 | C3 | A3 | B3 | C4 | A4 | B4 | C5 | A5 | B5 | C6 | A6 | B6 |
| MKS® Osteo Rückenplatte mit Reklinationsgurten (S 46 cm) | 761-066-S | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    |
| MKS® Osteo Rückenplatte mit Reklinationsgurten (M 50 cm) | 761-067-S |  | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |
| MKS® Osteo Rückenplatte mit Reklinationsgurten (L 56 cm) | 761-068-S |  |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |
| MKS® Leibteil Gr. 1<br>60 - 70 cm                        | 582-001-S | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MKS® Leibteil Gr. 2<br>70 - 80 cm                        | 582-002-S |  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MKS® Leibteil Gr. 3<br>80 - 90 cm                        | 582-003-S |  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MKS® Leibteil Gr. 4<br>90 - 105 cm                       | 582-004-S |  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| MKS® Leibteil Gr. 5<br>105 - 120 cm                      | 582-005-S |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |
| MKS® Leibteil Gr. 6<br>120 - 135 cm                      | 582-006-S |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |

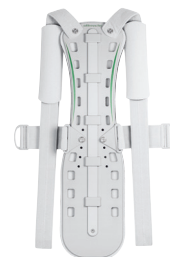

# Bedeutung der Maßangaben

